

MEDRAD Vistron CT®

MEDRAD CT

Injecteur scanner



*"MEDRAD...
des produits
fiables et
performants."*

MEDRAD®
Performance. For life.™

"Un service et des produits fiables. En toute confiance."


Pour améliorer la pratique de votre activité en TDM

Des équipes d'assistance compétentes et dévouées..un injecteur simple, efficace et sûr

Pour vous permettre de former votre personnel à l'utilisation de l'injecteur au scanner, MEDRAD met à votre disposition une équipe d'ingénieurs d'application constituée de manipulateurs confirmés et vous garantir ainsi une assistance complète, technique et clinique, dès l'installation. Le service après-vente et les mises à niveau du logiciel sont assurés par une large équipe de techniciens spécialisés, expérimentés et formés par MEDRAD.

La fiabilité démontrée des injecteurs pour le scanner de MEDRAD combinée à la qualité des services qui les entourent vous garantissent un fonctionnement extrêmement performant.

"Si tout fonctionnait aussi bien que mon MEDRAD..."

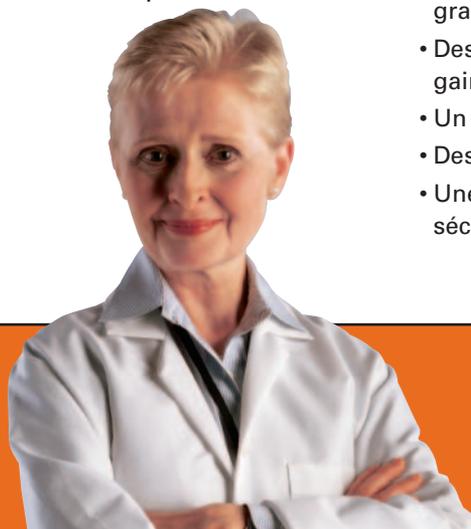

Performance. For life. Depuis 1964, le matériel MEDRAD est utilisé en toute confiance par le personnel hospitalier dans le monde entier, qui apprécie et reconnaît ses prestations sans failles. Hautement performants, les appareils MEDRAD les aident à affiner leurs diagnostics, pour une qualité de soin irréprochable. Avec l'injecteur Vistron de MEDRAD, vous retrouvez le même niveau de performance et d'assistance aux utilisateurs auquel MEDRAD vous a habitués.



MEDRAD VISTRON CT® INJECTEUR SCANNER

Systeme d'injection au scanner simple efficace et sûr ...pour obtenir d'excellentes images



Une nouvelle tête d'injection compacte et programmable:

- Programmer et lancer l'injection près du patient, pour une plus grande sécurité avec la meilleure ergonomie
- Des fonctions de remplissage automatique pour un meilleur gain de temps en salle
- Un affichage clair pour un contrôle efficace en cours d'injection
- Des profils d'injection de 1 à 4 phases pour tout type d'examen
- Une limite de pression programmable pour une plus grande sécurité

"Très fiable et facile à utiliser"



- Un boîtier de contrôle à distance compact pour un parfait suivi de l'injection à la console du scanner



- Des seringues U.U. à chargement frontal de type *Qwik-Fit*®, d'une clarté absolue, pour la sécurité du patient et de l'utilisateur
- Un choix de taille de seringues: 125 ml ou 200 ml, interchangeable automatiquement



"Parfaitement adapté à tous nos patients, il est très facile à utiliser."

- Une programmation souple et rapide:
 - Sélectionner un débit et un volume, l'injecteur calcule automatiquement la durée
 - Sélectionner une durée et un volume, l'injecteur calcule le débit
- Un bouton de purge manuelle précis pour effectuer de petites injections-test
- Une configuration traduite dans chaque pays

Fiabilité, assistance et qualité des services de MEDRAD réunis

- Fiabilité légendaire de ses produits
- Service après-vente irréprochable
- Support technique compétent et fiable
- Renseignez-vous sur les programmes MEDRAD de maintenance préventive (MEDRAD Preventive Maintenance™) et sur les extensions de garantie



"La philosophie qui les anime est tout entière au service du patient et des bénéficiaires qu'il en tirera."



Pied fixe



Pied réglable en hauteur (option)



Suspension murale ou plafonnrière (option)



Unité centrale

Caractéristiques techniques de l'injecteur MEDRAD Vistron CT®

Tête d'injection programmable

Dimensions	
H	12,7 cm
L	34,3 cm
P	26,0 cm

Poids
4,1 kg
sans câbles

Boîtier de commande

Dimensions	
H	18,8 cm
L	13,2 cm
P	5,3 cm

Poids
1,0 kg
sans câbles

Unité centrale

Dimensions	
H	10,2 cm
L	30,5 cm
P	17,8 cm

Poids
2,3 kg
sans câble d'alimentation

Alimentation électrique:
100-240 V courant alternatif
50/60 Hz

Limite de pression:
programmable de 50 à
300 PSI par incrément
de 50 PSI

**Température du manchon
thermostaté:**
31 à 41°C

Retard Rx:
0 à 99 s

Seringues:
Seringue U.U. à chargement
frontal de type *Qwik-Fit*
125 ml ou 200 ml

**Débit de remplissage
automatique:**
7 ml/s

Raccord Patient:
1,52 m, basse pression,
spirale

Possibilités d'injection:
de 1 à 4 phases

Plage de Débit:
0,1 à 9,9 ml/s par incrément de 0,1 ml/s

Plage de Volume:
10 ml à la contenance de la seringue
(125 ml ou 200 ml) par incrément de 1 ml

Plage de Durée:
1 s à 20:50 pour une seringue de 125 ml
1 s à 33:20 pour une seringue de 200 ml

Références

MEDRAD Vistron CT 610
Configuration standard
avec boîtier de contrôle à
distance et tête d'injection
sur pied fixe
Catalogue #VCT 610

MEDRAD Vistron CT 600
Configuration de base
(support de tête et longueur
de câbles à préciser) à
utiliser pour une
installation personnalisée
Catalogue #VCT 600

MEDRAD se réserve le droit de modifier les spécifications et caractéristiques décrites dans le présent document ou d'interrompre la fabrication du produit décrit à tout moment et sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant agréé MEDRAD pour obtenir les informations les plus récentes.

MEDRAD, les seringues Qwik-Fit ainsi que MEDRAD Vistron CT sont des marques déposées au niveau fédéral, et "Performance. For life.", et "Preventive Maintenance" est une marque de MEDRAD, INC. aux États-Unis.

CE 0123

© 2005 MEDRAD, INC. Tous droits réservés.

95403-00-BA-04 Rev. B



2003 Award Recipient MEDRAD, INC.

Le Malcolm Baldrige National Quality Award est la plus haute distinction nationale décernée pour l'excellence et la recherche de qualité. Créé en 1987, ce prix doit son nom à l'ancien Secrétaire au Commerce, Malcom Baldrige. Il récompense les réalisations exemplaires dans sept domaines : le leadership, la planification stratégique, la priorité donnée à la clientèle et aux marchés, l'information et l'analyse, les ressources humaines, la gestion des processus et les résultats commerciaux. Le NIST (National Institute of Standards and Technology), une agence fédérale liée au Département du Commerce américain, gère le programme de qualité Baldrige en étroite collaboration avec le secteur privé. Le Prix est traditionnellement remis par le Président des États-Unis au cours d'une cérémonie spéciale qui a lieu à Washington, D.C.

MEDRAD France S.a.r.l.
P.A. SILIC - BP 70514 Wissous
8, rue des Pyrénées
94623 Rungis Cedex
France
Téléphone: +33 (0) 1.46.86.98.84
Fax: +33 (0) 1.46.86.98.83

MEDRAD Europe B.V.
P.O. Box 205
6190 AE Beek
The Netherlands
Téléphone: +31 (0) 43-3585600
Fax: +31 (0) 43-3656598

[www.medrad.com/
vistron-ct](http://www.medrad.com/vistron-ct)
Pour de plus amples
informations:
info@medrad.com



MEDRAD®
Performance. For life.™